

YIGON CPAPブーシナック

急性肺水腫に効果の高いCPAP療法を簡単迅速かつローコストで行えます。

簡単なセットアップ

- ・セットアップはCPAP エクステンションチューブを流量計に接続するだけ。
- ・あとは患者さんへマスクを装着して PEEP を設定するだけで CPAP 開始です。

PEEP の調整は流量を可変するだけ

- ・PEEP は流量を上げれば高くなり、下げれば低くなります。
- ・マンノメーターを使用すれば常に PEEP を監視できます。

パーチャルバルブシステム採用

- ・流入される酸素の流体力学を利用して PEEP を調整するパーチャルバルブシステム。
- ・機械的なバルブを取り付ける必要が無くオープンな状態で CPAP が行えます。
- ・また、少ない酸素量で CPAP を行えます。




装着イメージ



CPAP 一式

(左からマンノメーター/マスク/エクステンションチューブ/ヘッドストラップ/流量計)

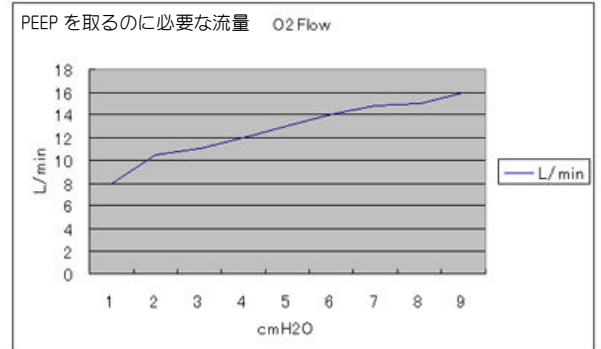

※上記データはマスクを平面に密着した状態で行っていきます。

●CPAP ブーシナック

販売名: CPAP ブーシナック 医療機器承認番号 21700BZY00584000

型式	品名	入数
5570.13	CPAP エクステンションチューブ (EOG 滅菌)	5
5557.45	フェイスマスク size4	5
5557.55	フェイスマスク size5	5
5559.01	ヘッドストラップ	1

※CPAP エクステンションチューブ以外は未滅菌品です

●圧測定用マンノメーター

販売名: CPAP ブーシナック 医療機器承認番号 21700BZY00584000

型式	品名	入数
527.01	マンノメーター	1

●30L/min 流量計

販売名: 医療用酸素流量計 製造販売元: 新鋭工業株式会社 医療機器承認番号 21000BZZ00239000

型式	品名	入数
N102P	30L/min 流量計 ピンインデックス式	1
N102S	30L/min 流量計 シュレーダー式	1



救急車搭載等にバッグ入りセットもあります。
(画像はイメージです)

製造販売元



株式会社パルメディカル

東京都千代田区岩本町三丁目9番17号 スリーセブンビル6階
TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980 <http://www.palmedical.co.jp/>
支店: 広島 札幌 営業所: 常広 仙台 神奈川 大阪 福岡 工場: 群馬

製造元



FRANCE