

抗がん剤などの調製・投与における
汚染・曝露が懸念されています。
エクアシールドは医療従事者の
職業被曝を防止するための
安全な環境作りをサポートします。

■3つの特徴

Safe 安全


調製者の安全に配慮したシステムです。
ハザードスドラッグ(HD)の外部への漏出を防ぎ、
医療従事者及び医療環境への曝露を防止します。

Simple 簡単

従来の調製業務から大きく逸脱することなく、
簡単に取り扱いできる器具をラインアップしています。
赤色のマークを合わせる独自の機構で、
わかりやすく確実に接続できます。

Closed 閉鎖式

バイアル及び輸液バッグへの接続時に、
薬液とエアを等量交換することで等圧を保ち、
また、薬液及び気化した薬液の外部への漏出を防ぎます。

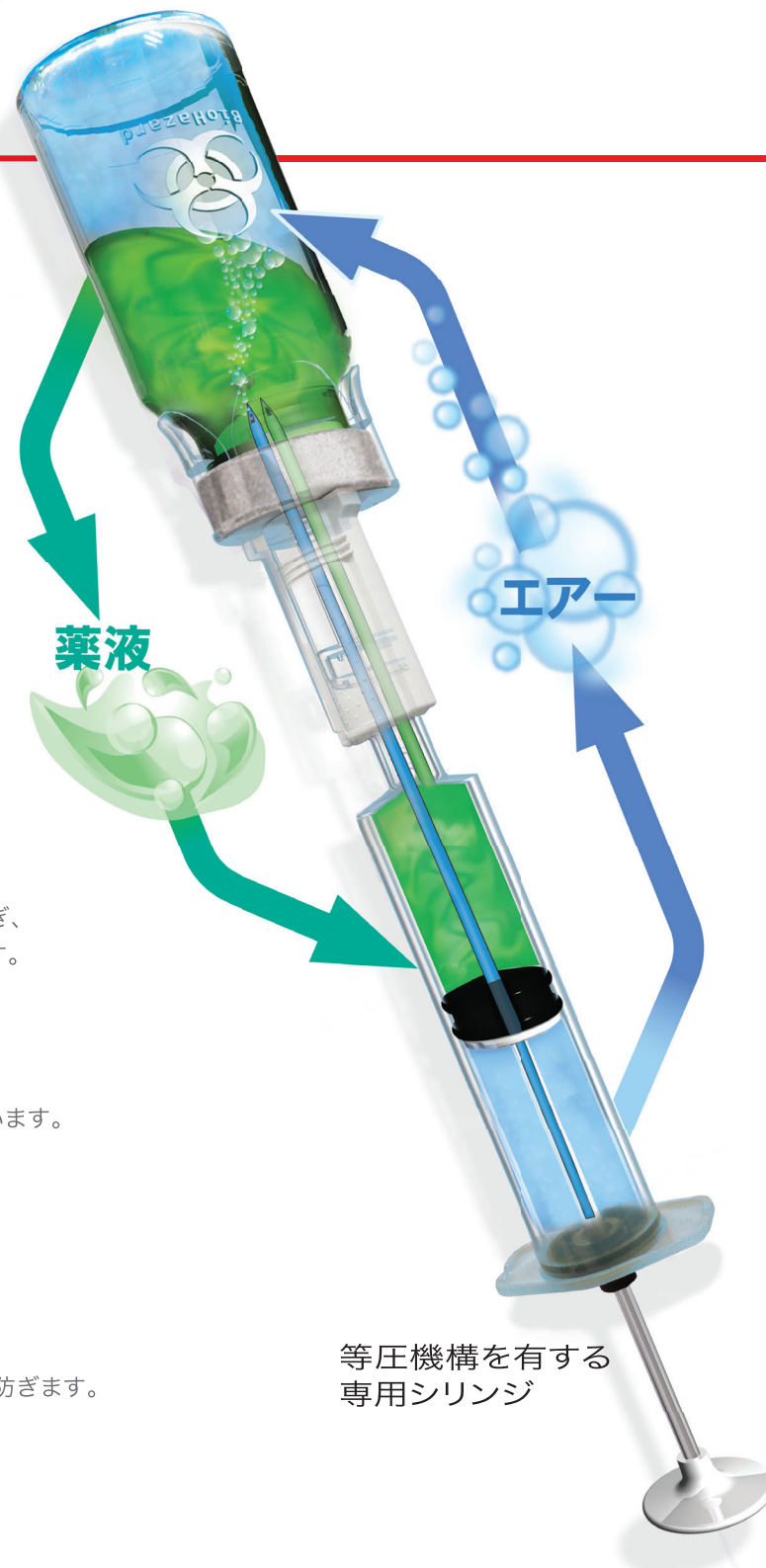

内蔵型の針で 針刺し事故を回避

シリンジとコネクタは一体型となっており、
万が一のコネクタの脱落を防止できます。
また、バイアルアダプタ等との接続時以外は、
内蔵針はコネクタ内部に格納されております。



わかりやすく 簡単な接続機構

赤色のマークを合わせて押し込むだけで
簡単に接続できます。



シリンジ後部も 閉鎖式

気化した抗がん剤の漏出
を防ぎます。
また、最大まで引いてもプ
ランジャーがシリンジ本体
から脱落しない構造です。



接続面は メンブレン構造


メンブレン構造の
高い密閉性により
薬剤漏れを防止します。



■局所投与時の曝露対策


エクアシールドでの膀胱注入

薬液注入部にカテーテルコネクタを接続することで、
曝露リスクを低減させることができます。

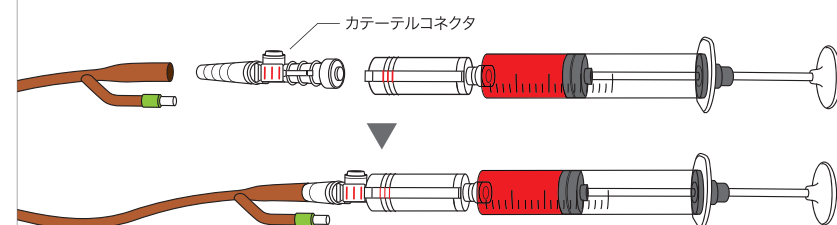


シリンジ間での薬液の移送

シリンジシリンジコネクタを使用することで、
より安全な薬液の移送が可能となります。

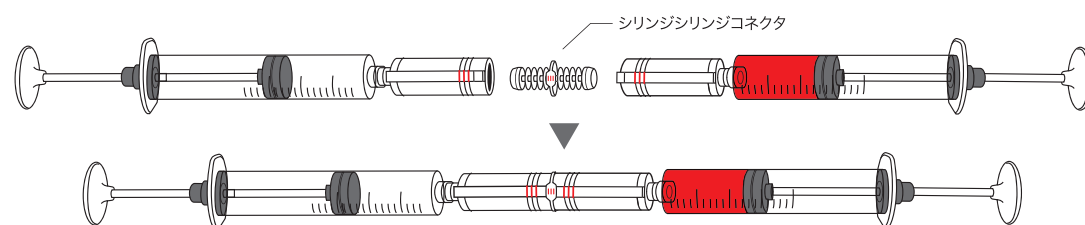

EQUASHIELD® シリンジユニット

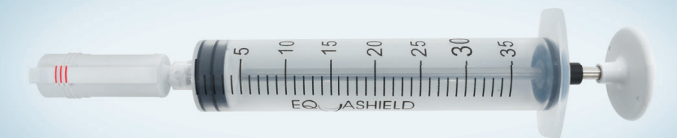

HDの安全な調製・投与を実現するため、等圧機能および完全閉鎖を実現して薬剤の漏れを防止します。 1mL、3mL、5mL、10mL、20mL、35mL、60mL対応

EQUASHIELD® バイアルアダプタ



標準バイアル各種に装着でき、シ
リンジユニットとの接続時には無菌
性を保ち、安全な接続を行うことが
できます。
13mm、17mm、20mm、32mm対応

EQUASHIELD® スパイクアダプタ



輸液などから溶解液の抜き取り、および薬液の
注入作業の際に使用。輸液バッグやシリンジユ
ニットとの安全な接続を実現します。

EQUASHIELD® メスルアーロックコネクタ



輸液ラインの先端に接続して使用するた
めのコネクタです。各種投与ルートにも
接続可能です。

EQUASHIELD® スィベルメスルアーロックコネクタ



輸液ライン等に一度接続すると外れな
いメスルアーロックコネクタです。
(スピニングタイプ)

EQUASHIELD® オスルアーロックコネクタ



三方活栓などに取り付けて、メスルアー
ロックコネクタやシリンジユニットと接続
するためのコネクタです。

EQUASHIELD® シリンジシリンジコネクタ





2本のシリンジユニットで薬液を閉鎖的
に移送するためのコネクタです。

EQUASHIELD® カテーテルコネクタ



カテーテルへ接続して薬液を閉鎖的に注入するコネクタです。(膀胱注入療法など)

トーション・エクアシールド 製品ラインアップ

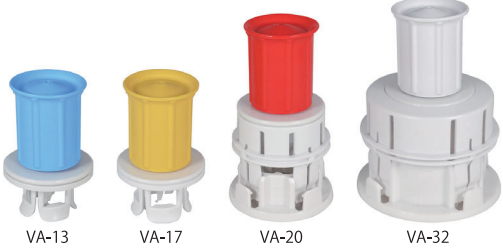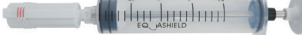	型番	製品名	入数	JAN	製品写真
バイアルアダプタ	VA-13	バイアルアダプタ 13mm	30	4573329480397	
	VA-17	バイアルアダプタ 17mm	30	4573329480403	
	VA-20	バイアルアダプタ 20mm	10	4573329480410	
	VA-20	バイアルアダプタ 20mm	50	4573329480427	
	VA-32	バイアルアダプタ 32mm	25	4573329480458	
シリンジユニット	SU-1	シリンジユニット 1mL	15	4573329480465	
	SU-3	シリンジユニット 3mL	15	4573329480472	
	SU-5	シリンジユニット 5mL	15	4573329480489	
	SU-10	シリンジユニット 10mL	35	4573329480496	
	SU-20	シリンジユニット 20mL	30	4573329480502	
	SU-35	シリンジユニット 35mL	25	4573329480519	
	SU-EZ60	シリンジユニット 60mL	15	4573329480526	
スパイクアダプタ	SA-1J	スパイクアダプタ	20	4573329480366	
コネクタ	FC-1	メスルアーロックコネクタ	30	4573329480311	
	FC-1S	スィベルメスルアーロックコネクタ	30	4573329480328	
	LL-1	オスルアーロックコネクタ	30	4573329480335	
	LL-1C	カテーテルコネクタ	20	4573329480359	
	LL-1DC	シリンジシリンジコネクタ	10	4573329480342	

一般の名称：閉鎖式薬剤移注システム 販売名：トーション・エクアシールド 遮封式薬物移注システム 医療機器承認番号：30200BZX00064000 JMDNコード：71055002



安全な調製・投与を実現する閉鎖式薬剤移注システム

EQ UASHIELD®

Closed System for Drug Transfer



株式会社パルメディカル
東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル6F
TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980
<http://www.palmedical.co.jp/>



【総代理店】
株式会社トーション
東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL 03-3745-1333 FAX 03-3745-1547



【製造販売元】
アルゴキアシステム株式会社
愛知県豊田市花園町屋敷198-2



【製造業者】
エクアシールドメディカルLtd.
EquashieldMedicalLtd.(イスラエル)