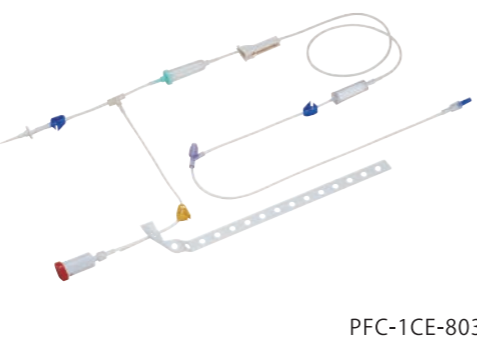
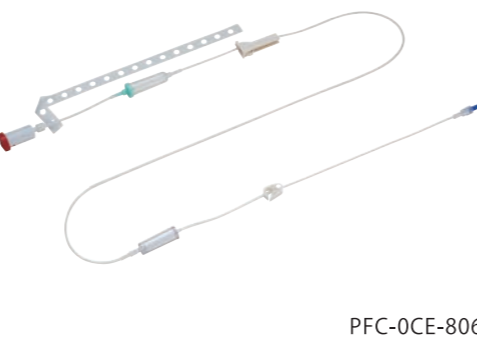


パル輸液セット SEEVOL® 対応製品ラインアップ

形状	型式	入数	共通商品コード (JAN)	フィルタ-0.2µm	側管	接続部形状	製品写真
ダブルタイプ	PIC-0CE-800	15	4580167163641				 PFC-1CE-803
	PIC-1CE-801		4580167163658		●	エクアシールド	
	PFC-0CE-802		4580167163665	●			
	PFC-1CE-803		4580167163672	●	●	ISO	
	PIC-0C-807		4580167163719				
	PIC-1C-808		4580167163726		●		
	PFC-1C-809		4580167163733	●	●		
シングルタイプ	PIC-0CE-804	15	4580167163689				 PFC-0CE-806
	PIC-1CE-805		4580167163696		●	エクアシールド	
	PFC-0CE-806		4580167163702	●			
	PIC-0C-810		4580167163740				
	PIC-1C-811		4580167163757		●	ISO	
	PFC-1C-812		4580167163764	●	●		
	PIC-0C-813		4580167163771				
	PFC-1C-814		4580167163788	●	●	びん針	

一般の名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 販売名：パル輸液セット 医療機器認証番号：218AIBZX00062000
 ※1 一般の名称：医薬品注入コントローラ 販売名：輸液コントローラ SEEVOL 医療機器承認番号：30300BZX00129000 製造販売業者：株式会社村田製作所
 「SEEVOL」は株式会社村田製作所の登録商標です。
 ※2 一般の名称：閉鎖式薬剤移注システム 販売名：トーション・エクアシールド 遮封式薬物移注システム 医療機器承認番号：30200BZX00064000
 製造販売業者：アルゴキアシステム株式会社

安全な抗がん剤投与を実現する輸液システム

パル輸液セット

— SEEVOL® 対応 —



■ 製造販売業者
株式会社パルメディカル

〒135-0014
東京都江東区石島 2-14 Imas Riverside 3F-C
TEL 03-6458-6845 FAX 03-6458-6574
<https://www.palmedical.co.jp/>

■支店：広島 札幌 ■営業所：福岡 大阪 帯広 ■工場：群馬
(商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)

安全な抗がん剤投与を実現する輸液セット

輸液コントローラSEEVOL[®]*1に適した形状

閉鎖式薬剤移注システムと併用可能

各種閉鎖式薬剤移注システムに対応できるように、びん針部分の形状を複数ラインアップ




輸液コントローラSEEVOL[®]*1について


- 正確な輸液制御
- 低リスクな自然落下式
- 使いやすい操作性

SEEVOL[®]対応点滴筒を採用

- SEEVOL[®]に確実に装着できる形状
- サテライト滴が発生しづらい形状
 - 水滴の大きさが安定
 - 点滴筒内面への付着を減少

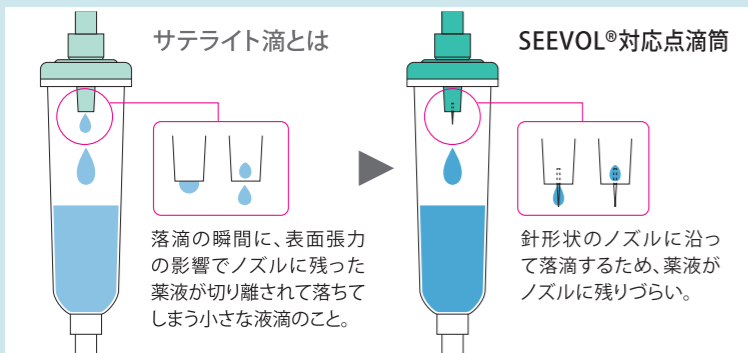

エクアシールド一体型輸液ライン

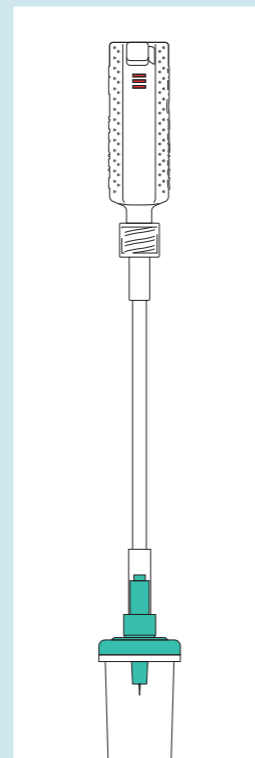


- エクアシールドメスルアー(FC-1)が接続された一体型輸液ライン。
- 薬剤調製システムエクアシールドと併用してご使用いただけます。



エクアシールド[®]*2

ISO汎用オスルアー


- 接続口がISO汎用オスルアーになっている輸液セット。
- 市販されている閉鎖式移注コネクタとの接続が可能。
- ご使用中の閉鎖式薬剤移注システムと併用してご使用いただけます。

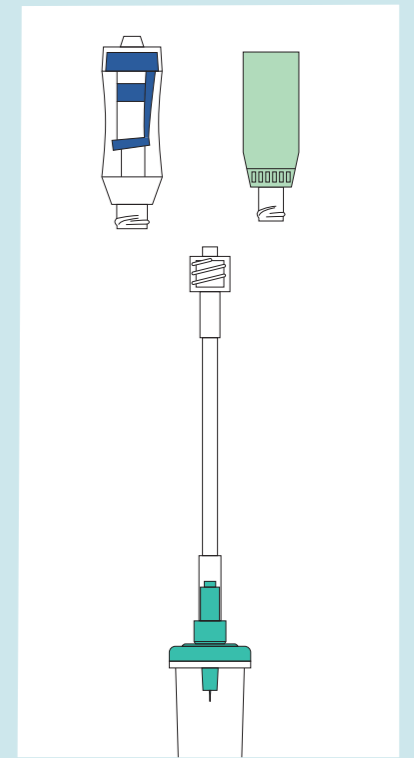

多くの投与方法に対応可能

■ 豊富なラインアップ。形状もシングルタイプ・ダブルタイプからお選びいただけます。

シングルタイプ (使用方法)

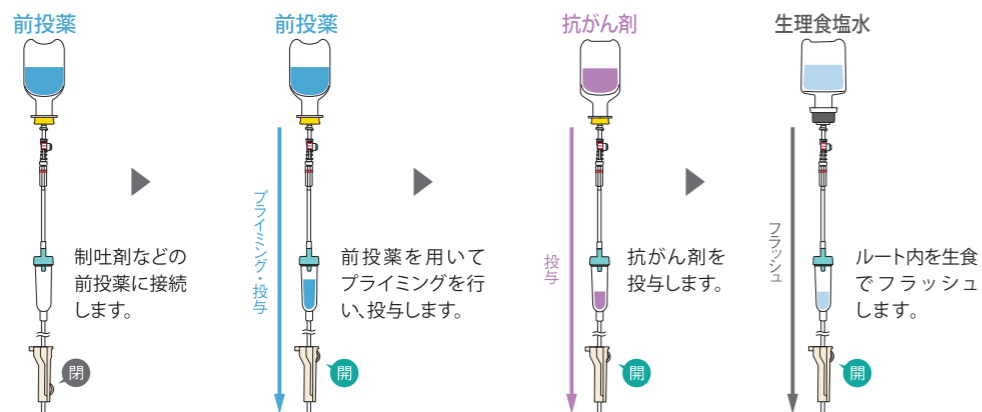

ダブルタイプ (使用方法)

